


L'ESPERTO
CONSIGLIA

Come effettuare la pulizia interdentale: ecco la tua **CHECKLIST**



Pulisci gli spazi tra i denti
ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO
dopo aver lavato i denti

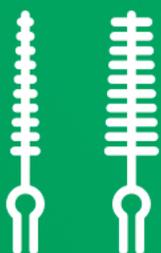

Scegli lo scovolino interdentale e
la **MISURA** più adatti alle tue esigenze



Pulisci **DELICATAMENTE** per evitare
di irritare le gengive



Lascia **ASCIUGARE VERTICALMENTE**
lo scovolino interdentale per prevenire
la proliferazione di batteri



Subito **DOPO LA PULIZIA INTERDENTALE**
risciacqua utilizzando un **COLLUTORIO**