

SUNSTAR

4200

G·U·M®

PowerCARE™

PROFESSIONAL EXPERTISE

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΛΑΚΑΣ

ΑΠΑΛΗ ΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΛΑ ΣΑΣ



HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.®



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μάρκα GUM® στηρίζεται στη βασική φιλοσοφία της πρόληψης, της καινοτομίας και της ποιότητας, όλα με γνώμονα το πρωτοποριακό όραμα της SUNSTAR για «διατήρηση ενός υγιούς σώματος μέσα από ένα υγιές στόμα». Στη GUM® είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθάμε τους ανθρώπους να διατηρούν υγιή ούλα και δόντια σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η Σημασία της Καλής Στοματικής Φροντίδας


Το στόμα είναι γεμάτο βακτήρια. Αν δε βουρτσίζετε καλά τα δόντια σας ή δε χρησιμοποιείτε τα σωστά προϊόντα, η οδοντική πλάκα μπορεί να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει πέτρα. Τα βακτήρια και η πέτρα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή των ούλων, γνωστή και ως ουλίτιδα. Τα ούλα πρήζονται, γίνονται κόκκινα και αιμορραγούν. Χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει τελικά σε απώλεια δοντιού.

Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες είναι πιο αποτελεσματικές στην αφαίρεση πλάκας, επειδή βοηθούν στη βελτίωση της τεχνικής βουρτσίσματος και στη συμμόρφωση χρόνου (2 λεπτά).

Η GUM® PowerCARE™ έχει μία μοναδική κεφαλή, με ultra-λεπτές τρίχες, η οποία παρέχει βαθύ καθαρισμό ακόμα και στις δυσπρόσιτες περιοχές, κάτω από τη γραμμή των ούλων και μεταξύ των δοντιών, για να βοηθήσει στη διατήρηση βέλτιστης στοματικής υγείας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Γράφημα 1)

1. Κεφαλή με ultra-λεπτές τρίχες
2. Εργονομική λαβή
3. Κομπι ON/OFF/MODE
4. Προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη του αισθητήρα πίεσης
5. 2 λειτουργίες βουρτσίσματος
6. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
7. Βάση φόρτισης με καλώδιο

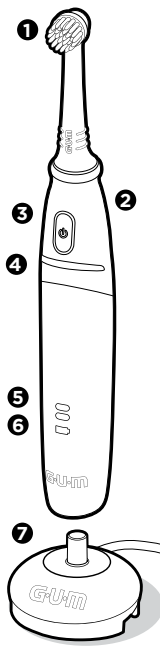

Γράφημα 1

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά όταν βρίσκονται παιδιά στο χώρο, βασικές προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1. Μην βυθίζετε το φορτιστή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο ντους.
3. Μην πιάνετε το φορτιστή αν έχει πέσει μέσα στο νερό. Βγάλτε από την ριζα αμέσως.
4. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το φορτιστή σε σημείο που μπορεί να πέσει ή να σπρωχτεί σε μανιέρα, ντους ή νιπτήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού ανθρώπων:

1. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από, σε ή κοντά σε παιδιά ή ανθρώπους με αναπηρία.
2. Το προϊόν δεν ενδείκνυται για χρήση από παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Καθαρισμός της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Χρησιμοποιήστε μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν αν έχει φθορά σε καλώδιο ή βύσμα, αν δε λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει ή καταστραφεί ή αν ο φορτιστής έχει πέσει μέσα σε νερό.
- Κρατήστε το καλώδιο του φορτιστή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Ποτέ μη ριχνετε τη συσκευή κάτω ή μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμά της.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα aerosol (σπρέι). Μη χρησιμοποιείτε όπου κορηνγείται οξυγόνο.
- Συνδέστε αυτό το προϊόν σε σωστά γειωμένη πρίζα μόνο.
- Ποτέ μην πιέζετε το βύσμα στην πρίζα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δε μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, παρακαλείσθε να απορρίψετε το φορτιστή.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σημειώστε τα παρακάτω για την ασφάλειά σας:

- Επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας πριν τη χρήση αν έχετε υποβληθεί σε περιοδοντική ή άλλη επέμβαση στη στοματική κοιλότητα τους τελευταίους 12 μήνες ή αν λαμβάνετε θεραπεία για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση της στοματικής κοιλότητας.
- Υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάθε ήπια έως μέτρια αιμορραγία των ούλων που προκύπτει θα πρέπει να σταματήσει όταν τα ούλα γίνονται υγιή και πάλι. Επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας αν προκύψει εκτεταμένη αιμορραγία, αν η αιμορραγία επιμένει μετά από 2 εβδομάδες βουρτσίσματος με αυτό το προϊόν, ή αν βιώνετε οποιαδήποτε δυσφορία ή πόνο όταν βουρτσίζετε.
- Μη χρησιμοποιείτε κεφαλή με κατεστραμμένες ή λυγισμένες τρίκες. Αντικαταστήστε άμεσα με νέα κεφαλή.
- Ελέγχετε περιοδικά τη λαβή, την κεφαλή, το καλώδιο του φορτιστή, το βύσμα και το σημείο εισόδου του καλωδίου στο φορτιστή για πιθανή βλάβη. Μη συνεχίζετε τη χρήση ενός προϊόντος με βλάβη.
- Μην πιάνετε το φορτιστή ή το βύσμα τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη συνδέετε το φορτιστή σε ηλεκτρική πρίζα αμέσως μετά από κατά λάθος πτώση του σε νερό ή άλλο υγρό. Αφήστε το φορτιστή να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα.
- Αν η οδοντόβουρτσα πέσει κάτω, η κεφαλή πρέπει να αντικατασταθεί πριν την επόμενη χρήση ακόμα και αν δεν είναι εμφανής κάποια βλάβη.
- Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, πάντα να το κάνετε κρατώντας το βύσμα τροφοδοσίας και όχι το καλώδιο.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει μέρη που επιδιορθώνονται από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε την επισκευή, τροποποίηση ή αποσυρματολόγηση κανενός μέρους της λαβής ή του φορτιστή. Αν το κάνατε αυτό μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ GUM® POWERCARE™

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΣ


Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την οδοντόβουρτσα GUM® PowerCARE™ για τουλάχιστον 16 ώρες.

- Συνδέστε το φορτιστή στην ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη πριν τη φόρτιση. Δε μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Η πλήρης φόρτιση χρειάζεται τουλάχιστον 16 ώρες και θα πρέπει να καλύπτει 10 ημέρες βουρτσισμού, με βάση πρόγραμμα βουρτσίσματος 2 λεπτών δύο φορές την ημέρα.
- Όταν η λαβή είναι στο φορτιστή, η ένδειξη της μπαταρίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 6) θα αναβοσβήνει πράσινη, υποδεικνύοντας ότι φορτίζει. Όταν το φως γίνει σταθερό πράσινο και δεν αναβοσβήνει πια, η λαβή είναι φορτισμένη πλήρως.
- Όσο χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, η ένδειξη της μπαταρίας θα παραμένει πράσινη, υποδεικνύοντας ότι η βούρτσα είναι φορτισμένη πλήρως.
- Όταν η μονάδα χρειάζεται φόρτιση, η ένδειξη της μπαταρίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 6) θα γίνει κόκκινη όσο η λαβή είναι ενεργοποιημένη. Στη συνέχεια, θα αναβοσβίσει κόκκινο για 15 δευτερόλεπτα, όταν η λαβή απενεργοποιηθεί.

Η οδοντόβουρτσα μπορεί να αποθηκεύεται πάνω στη βάση φόρτισης (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 7) για να διατηρείται πλήρως φορτισμένη. Για να φορτίσετε / ξαναφορτίσετε την οδοντόβουρτσα GUM® PowerCARE™, χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΣ

1. Εισάγετε την κεφαλή στο πάνω μέρος της λαβής, με τις τρίχες να έχουν φορά προς τα μπροστά (δείτε Γράφημα 2).
2. Με μέτρια πίεση, πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω, μέχρι το κάτω μέρος της να σταματήσει στο πάνω μέρος της λαβής (δείτε Γράφημα 2).
3. Αν η κεφαλή δεν πιέζεται προς τα κάτω, ίσως δεν έχει φορά προς τα μπροστά και δε βρίσκεται στο κέντρο του άξονα της λαβής. Επαναλάβετε το παραπάνω Βήμα 1.

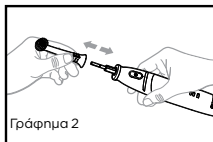

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ

1. Για να βοηθήσει την προστασία των δοντιών και των ούλων από το πολύ δυνατό βούρτσισμα, ένας αισθητήρας πίεσης έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.
2. Αν εφαρμόζεται έντονη πίεση κατά το βούρτσισμα, η προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη του αισθητήρα πίεσης (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 4) θα γίνει μπλε και θα αναβοσβήνει για όσο η υπερβολική πίεση συνεχίζει να εφαρμόζεται. Αυτό είναι μία υπενθύμιση για τη μείωση της πίεσης ενώ βουρτσίζετε. Όταν μειώσετε τη πίεση, το μπλε φως θα σβήσει αυτόματα.

2-ΛΕΠΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

1. Οι οδοντίατροι συστήνουν βούρτσισμα όλου του στόματος για τουλάχιστον δύο λεπτά ή 30 δευτερόλεπτα για κάθε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια του στόματός σας. Ένα τεταρτημόριο περιλαμβάνει όλες τις επιφάνειες των δοντιών, από το μπροστά κέντρο του στόματος μέχρι το τελευταίο δόντι πίσω. Υπάρχουν τέσσερα τεταρτημόρια, αριστερά και δεξιά, κάτω και πάνω.
2. Στο τέλος των 30, 60 και 90 δευτερολέπτων, θα γίνουν 2 σύντομες δονήσεις. Αυτές οι δονήσεις σηματοδοτούν ότι είναι ώρα να περάσετε σε νέο τεταρτημόριο. Στο τέλος των 2 λεπτών, θα γίνουν 4 σύντομες δονήσεις. Η βούρτσα θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά τα 2 λεπτά, με δονήσεις ανά 30 δευτερόλεπτα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΥΡΤΣΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ GUM® POWERCARE™

1. Εφαρμόστε ποσότητα οδοντόπαστας σε μέγεθος μπιζελιού στην επιφάνεια των τριχών.
2. Εισάγετε την οδοντόβουρτσα στο στόμα σας και τοποθετήστε την κεφαλή σε ένα δόντι στη πίσω πλευρά. Πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 3). Βουρτσίστε με την «Καθημερινή λειτουργία» ή πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE ξανά για να αλλάξετε σε «Ευαίσθητη λειτουργία».
3. Για βέλτιστο καθαρισμό, βουρτσίστε απαλά κατά μήκος της γραμμής των ούλων, κάθε ένα δόντι, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη μαστική επιφάνεια με οριζόντιες κινήσεις.
4. Μην πιέζετε υπερβολικά δυνατά κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Στο τέλος κάθε διαστήματος 30 δευτερολέπτων, αλλάξτε τεταρτημόριο και επαναλάβετε όπως επισημαίνεται στο Βήμα 3, μέχρι να επιτευχθεί ο προτεινόμενος χρόνος βουρτσίσματος των 2 λεπτών.

Σημείωση: Ήπια αιμορραγία μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των πρώτων λίγων ημερών χρήσης. Αν η αιμορραγία επιμένει για περισσότερες από δύο εβδομάδες, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

1. Καθημερινή - Για βαθύ και απαλό καθημερινό καθαρισμό.
2. Ευαίσθητη - Extra απαλή, για ευαίσθητα δόντια ή ούλα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

1. Όταν η οδοντόβουρτσα είναι ενεργοποιημένη (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 3), θα ξεκινήσει αυτόματα με «Καθημερινή λειτουργία». Η πάνω φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 5) θα γίνει πράσινη.
2. Για να αλλάξετε σε «Ευαίσθητη λειτουργία», πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE για δεύτερη φορά. Η κάτω φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 5) θα γίνει τότε πράσινη.
3. Πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE ξανά για να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα ή δύο φορές για να επιστρέψετε στην «Καθημερινή λειτουργία».

ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ



Η κεφαλή πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3 μήνες, όπως συστήνεται από τους οδοντίατρους ή νωρίτερα αν εμφανιστούν ορατά σημάδια φθοράς. Μία φθαρμένη κεφαλή δε θα παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό των δοντιών.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

1. Κρατήστε τη λαβή με το ένα χέρι και την κεφαλή με το άλλο χέρι.
2. Τραβήξτε την κεφαλή προς τα πάνω για να αποχωριστεί από τη λαβή (δείτε Γράφημα 2).
3. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη κεφαλή και εισάγετε νέα κεφαλή στη λαβή.
4. Πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω, μέχρι το κάτω μέρος της να σταματήσει στο πάνω μέρος της λαβής (δείτε στο Γράφημα 1 και 2).

Συμβατή μόνο με ανταλλακτικές κεφαλές βούρτσας GUM® PowerCARE™. Άλλες κεφαλές βούρτσας δεν είναι εγκεκριμένες για χρήση σε αυτό το προϊόν και μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ





Σημαντικό: Καθαρίστε τη λαβή και την κεφαλή της οδοντόβουρτσας μετά από κάθε χρήση, για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σας οδοντόβουρτσας.

1. Λαβή και κεφαλή:

- α) Ξεπλύνετε τη λαβή της βούρτσας κάτω από τρεχούμενο νερό μέχρι να καθαρίσει (δείτε Γράφημα 3).
- β) Έχοντας τη λαβή απενεργοποιημένη, αφαιρέστε την κεφαλή (δείτε Γράφημα 2). Ξεπλύνετε τη λαβή, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από τον μεταλλικό άξονα που προσαρτάται η κεφαλή, με κλειρό τρεχούμενο νερό (δείτε Γράφημα 4).
- γ) Σκουπίστε τη λαβή και την κεφαλή για να στεγνώσουν (δείτε Γράφημα 5).
- δ) Επανατοποθετήστε την κεφαλή στη λαβή.

2. Βάση φόρτισης:

- α) Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν το καθαρίσμα.
- β) Καθαρίστε τη βάση φόρτισης με ένα υγρό ύφασμα (ΜΗ βυθίσετε σε νερό ή άλλα υγρά, μην ξεπλύνετε με νερό ή μην εισάγετε μέσα σε νερό για να καθαρίσετε). Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει τελείως πριν τη συνδέσετε πάλι στην ηλεκτρική πρίζα (δείτε Γραφήματα 6 και 7).

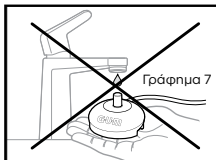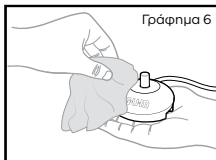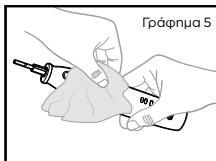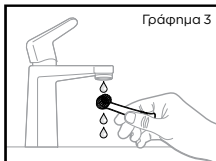

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές μπαταρίας

2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH): 2.4V DC
Χωρίς κάδμιο, μόλυβδο και υδράργυρο.

Τροφοδοσία φορτιστή

- Είσοδος: 220-240V -50Hz
- Τροφοδοσία: 0.9W

Μην συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα με τάση μεγαλύτερη από την προαναφερόμενη.

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Περιβαλλοντική σημείωση

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά απόβλητα και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH). Για προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπίνης υγείας, μην απορρίψετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Όταν η οδοντόβουρτσα φτάσει στο τέλος της ζωής της ή πάθει ζημιά, παρακαλείστε να μεταφέρετε άθικτη τη λαβή στο κοντινό σας κέντρο ανακύκλωσης για απόρριψη.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η οδοντόβουρτσα δεν ενεργοποιείται	• Μπορεί να χρειάζεται φόρτιση	• Πιέστε απαλά το κουμπί ON/OFF/MODE ξανά • Φορτίστε την οδοντόβουρτσα σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου
	• Οδοντόπαστα μπορεί να έχει φράξει τις τρίκες	• Αν οδοντόπαστα έχει φράξει τις τρίκες της κεφαλής, ακολουθείστε τις οδηγίες καθαρισμού που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο
Η οδοντόβουρτσα χάνει τη φόρτισή της πολύ γρήγορα	• Για την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλη περίοδο μη χρήσης, η μπαταρία χρειάζεται 16 ώρες φόρτιση	• Εφαρμόστε μικρότερη πίεση όταν βουρτσίσετε • Φορτίστε συνεχόμενα για τουλάχιστον 16 ώρες
Οι τρίκες της κεφαλής φθείρονται πριν το διάστημα αντικατάστασης των 3 μηνών	Ενδεχομένως βουρτσίζετε πολύ δυνατά	Εφαρμόστε μικρότερη πίεση όταν βουρτσίζετε
Αίσθηση γαργαλήματος κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος	Αυτό είναι φυσιολογικό, ειδικά αν έχετε αλλάξει πρόσφατα από χειροκίνητη οδοντόβουρτσα	Μετά από μία εβδομάδα χρήσης, θα συνηθίσετε περισσότερο τη δόνηση
Τα ούλα ματώνουν ελαφρά	• Η λειτουργία βουρτσίσματος δεν είναι η βέλτιστη • Μπορεί να συμβεί τις πρώτες μέρες χρήσης	• Δοκιμάστε την «Ευαίσθητη λειτουργία» αντί για την «Καθημερινή λειτουργία» • Η αιμορραγία θα πρέπει να σταματήσει μετά από μερικές μέρες. Αν επιμένει για περισσότερες από 2 εβδομάδες, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.

Αν δε μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το πεδίο FAQ στο www.SunstarGUM.com.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Sunstar Europe SA εγγυάται ότι αυτό το προϊόν θα λειτουργεί χωρίς ελαττώματα σε υλικά και λειτουργικότητα, για μία περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις, αν η οδοντόβουρτσα GUM® PowerCARE™ παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά ή λειτουργικότητα εντός δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς, η Sunstar θα αντικαταστήσει την οδοντόβουρτσα σας χωρίς χρέωση. Απλά στείλτε ολόκληρη τη μονάδα, μαζί με τον φορτιστή, με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, μαζί με ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς (με κυκλωμένη την τιμή) και μία σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Εξαιρέσεις: αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει κεφαλές, οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τροποποιήσεις ή παραβίαση του προϊόντος, μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια επισκευής/μετατροπής του προϊόντος, χρήση αντίθετη με τις Οδηγίες Χρήσης, φυσιολογική φθορά, καθαρά αισθητική ζημιά η οποία δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της οδοντόβουρτσας, καθώς και χρήση κεφαλών ή φορτιστή μη εγκεκριμένων για αυτό το προϊόν.

Αυτή η Εγγύηση δε μεταφέρεται. Επίσης, μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, που εκφράζονται ή υπονοούνται ή έχουν θεσπιστεί, συμπεριλαμβανομένων όποιων συνεπαγόμενων εγγυήσεων εμπροθεσιμότητας, ευεξίας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή αποτυχίας απαραίτητης θεραπείας. Σε κανένα ενδεχόμενο δεν θα είναι η Sunstar Europe SA υπεύθυνη για επακόλουθες ή τυχαίες φθορές.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: INNOVIS PHARMA A.E.B.E

Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 15125, Τηλ: 216 2005600, email: info@innovispharma.gr